

## MT 800

IB MT 800 E-V11 1420



| Description of this Thermometer         | EN |
|-----------------------------------------|----|
| ① ON/OFF button                         |    |
| ② Display                               |    |
| ③ Battery compartment cover (back side) |    |
| ④ Measuring sensor                      |    |

##### Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device may be used only for measuring body temperature!
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact Micro-life-Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

##### Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the «M» icon. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

##### Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

##### Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

35 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

##### Reviewing the last Measurement

Press ON/OFF button ① for 2 seconds, when turning on the thermometer. The last measurement will be displayed together with a «M» for memory. Press the ON/OFF button again to switch off the device.

##### Measuring methods / Normal body temperature

##### ► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air.

##### Approx. measuring time: 10 seconds!

##### ► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

##### Approx. measuring time: 10 seconds!

##### ► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

We recommend measuring temperature orally or rectally. If using axillary measurement, a minimum measurement time of 5-10 minutes is required regardless of the beep sound.

##### Cleaning and Disinfecting


Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.

##### Battery Replacement

When the «▽» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

| Technical Specifications                                                              |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type:</b>                                                                          | Predictive maximum thermometer                                                                                                                                                       |
| <b>Measurement range:</b>                                                             | 32.0 <span> </span> °C to 43.9 <span> </span> °C<br>Temp. < 32.0 <span> </span> °C: display «L» for low (too low)<br>Temp. > 43.9 <span> </span> °C: display «H» for high (too high) |
| <b>Measurement accuracy:</b>                                                          | ± 0.1 <span> </span> °C between 34 <span> </span> °C and 42 <span> </span> °C                                                                                                        |
| <b>Operating conditions:</b>                                                          | 10 - 40 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % relative maximum humidity                                                                                                          |
| <b>Storage conditions:</b>                                                            | -25 - +60 <span> </span> °C; 15-95 <span> </span> % relative maximum humidity                                                                                                        |
| <b>Battery:</b>                                                                       | 1.5/1.55 V; LR41                                                                                                                                                                     |
| <b>Battery lifetime:</b>                                                              | approx. 4500 measurements (using a new battery)                                                                                                                                      |
| <b>IP Class:</b>                                                                      | IP67                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reference to standards:</b>                                                        | EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11                                                                                      |
| <b>Expected service life:</b>                                                         | 5 years or 10000 measurements                                                                                                                                                        |
| This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC. |                                                                                                                                                                                      |
| Technical alterations reserved.                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Guarantee</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                      |

We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective device well and send with official postage to your local Microlife-Service.

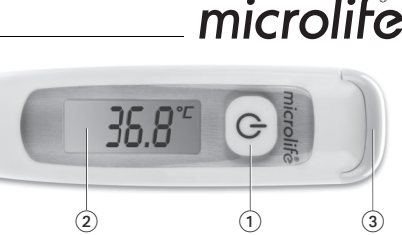

| Opis termometru                | PL |
|--------------------------------|----|
| ① Przycisk ON/OFF (wł./wył.)   |    |
| ② Wyświetlacz                  |    |
| ③ Złączka pojemnika na baterię |    |
| ④ Czujnik pomiarowy            |    |

##### Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania. Ten dokument zawiera ważne informacje o działaniu produktu i informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia. Przeczytaj dokładnie ten dokument przed użyciem urządzenia i zachowaj go na przyszłość.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do mierzenia temperatury ciała!
- Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnego, sygnalizowanego dźwiękiem czasu pomiaru!
- Dopilnuj, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru osób dorosłych; jego niektóre, niewielkie części mogą zostać łatwo połknięte.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu występowania silnego pola elektromagnetycznego powodowanego przez telefony komórkowe lub instalacje radiowe. Podczas użytkowania urządzenia utrzymuj dystans min. 3.3 m od takich urządzeń.
- Chroń urządzenie przed wstrząsami i upadkami!
- Nie odginać końcówki pod kątem większym niż 45°!
- Unikaj temperatury otoczenia powyżej 60 °C. Nigdy nie gotuj urządzenia!
- Do czyszczenia używaj wyłącznie dostępnych na rynku środków dezynfekujących wymienionych w rozdziale «Czyszczenie i dezynfekcja».
- Zaleca się sprawdzenie dokładności pomiarowej urządzenia co dwa lata lub zawsze, gdy poddane zostanie ono wstrząsom mechanicznym (np. w wyniku upuszczenia). Skontaktuj się z przedstawicielem Microlife w celu przeprowadzenia testów.

**UWAGA:** Podany przez to urządzenie wynik pomiaru nie jest diagnozą! Nie należy polegać tylko na wyniku pomiaru.

Zużyte baterie oraz urządzenia elektryczne muszą być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Typ zastosowanych części - BF

##### Włączanie termometru

Aby włączyć termometr, wcisnąć przycisk ON/OFF (wł./wył.) ①; krótki sygół dźwiękowy oznacza, że «termometr jest włączony». Następuje test wyświetlacza. Wszystkie elementy powinny być wyświetlone. Na wyświetlaczu ② pojawi się automatycznie na 2 sekundy wynik ostatniego pomiaru wraz z ikoną «M».

Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 32 °C, na wyświetlaczu ② pojawi się «L» i pulsujące «C». Termometr jest gotów do pomiaru.

##### Sprawdzenie działania

Prawidłowe funkcjonowanie termometru jest sprawdzane automatycznie po każdym jego włączeniu. W przypadku wykrycia awarii (nie dokładności pomiarowej) na wyświetlaczu pojawi się «ERR», a dalsze wykonywanie pomiarów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji termometr należy przesłać do serwisu w celu jego sprawdzenia.

##### Korzystanie z termometru

Wybierz żadaną metodę pomiaru. Podczas wykonywania pomiaru na wyświetlaczu podawana jest aktualna temperatura (miga symbol «C»). Jeśli sygnał dźwiękowy jest słyszalny 10 razy, a «C» nie miga, to oznacza, że określono przewidywalną temperaturę końcową i wynik można odczytać.

35 krótkich dźwięków informuje pacjenta o podwyższonej temperaturze jego ciała (powyżej 37,5 °C). Temperatura odniesienia: temperatura w ustach.

Aby uzyskaćw porównywalne wyniki stosuj 1 minutową przerwę pomiędzy pomiarami.

W celu przedłużenia trwałości baterii termometr należy wyłączyć zaraz po zakończeniu pomiaru za pomocą przycisku ON/OFF (wł./wył.) ①. W przeciwnym wypadku termometr wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

##### Przeglądanie ostatniego pomiaru

Naciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.) ① przez 2 sekundy, podczas włączania termometru. Ostatni pomiar będzie wyświetlany wraz z literą pamięci «M». Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.), aby wyłączyć urządzenie.

##### Metody pomiarowe / Bazowa temperatura ciała

##### ► W ustach (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej. Czujnik pomiarowy ④ musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto usta powinny być zamknięte - oddychamy nosem. W ten sposób unikniemy przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować przekłamania w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury.

##### Przybliżony czas pomiaru: 10 sekund!

##### ► Rektalna (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Metoda ta daje najbardziej dokładny wynik, szczególnie w przypadku niemowląt i dzieci. Ostrożnie umieść czujnik pomiarowy ④ w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm.

##### Przybliżony czas pomiaru: 10 sekund!

##### ► Pod pachą (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

Aby uzyskaćw bardziej wiarygodny wynik, zaleca się wykonanie pomiaru w ustach lub w odbycie. Minimalny rekomendowany czas pomiaru to 5-10 minut niezależnie od wcześniejszej sygnalizacji dźwiękowej.

##### Czyszczenie i dezynfekcja

Nazwa: Alkohol izopropylowy 70 %; zanurzyć: maks. 24 godziny.

##### Wymiana baterii

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się symbol odwróconego trójkąta «▽», oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić. W tym celu zdejmij pokrywkę pojemnika na baterię ③ termometru. Umieść nową baterię biegunem + ku górze. Upewnij się, że jest to bateria tego samego typu. Bateria te są dostępne w każdym sklepie z towarami elektrycznymi.

| Specyfikacja techniczna        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ:</b>                    | Termometr maksymalnych wskazań                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zakres pomiaru:</b>         | 32.0 <span> </span> °C do 43.9 <span> </span> °C<br>Przy temperaturze < 32.0 <span> </span> °C wyświetla się symbol «L» - niska (zbyt niska)<br>Przy temperaturze > 43.9 <span> </span> °C wyświetla się symbol «H» - wysoka (zbyt wysoka) |
| <b>Dokładność pomiaru:</b>     | ± 0,1 <span> </span> °C pomiędzy 34 <span> </span> °C a 42 <span> </span> °C                                                                                                                                                               |
| <b>Warunki pracy:</b>          | 10 - 40 <span> </span> °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 <span> </span> %                                                                                                                                                           |
| <b>Warunki przechowywania:</b> | -25 - +60 <span> </span> °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 <span> </span> %                                                                                                                                                         |
| <b>Bateria:</b>                | 1,5/1,55 V; LR41                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Żywotność baterii:</b>      | Okolo 4500 pomiarów (używając nowej baterii)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klasa IP:</b>               | IP67                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Normy:</b>                  | EN 12470-3, termometry kliniczne; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11                                                                                                                                             |

**Przewidywana żywotność urządzenia:** 5 lat lub 10000 pomiarów
Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie WYROBÓW Medycznych 93/42/EEC.
Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

##### Gwarancja

Udziela się wieczystej gwarancji, licząc od dnia nabycia. Wszystkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją. Gwarancja nie są również objęte baterie i opakowanie. Wyklucza się wszelkie inne roszczenia. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone wraz z dowodem zakupu. Proszę zapakować dokładnie niesprawne urządzenie i przesłać je po uiszczeniu pełnej opłaty pocztowej na adres dystrybutora Microlife.

| Описание термометра                            | RU |
|------------------------------------------------|----|
| ① Кнопка Вкл/Выкл                              |    |
| ② Дисплей                                      |    |
| ③ Крышка батарейного отсека (обратная сторона) |    |
| ④ Измерительный датчик                         |    |

##### Важные указания по безопасности

- Следуйте инструкциям по использованию. В этом документе содержатся важные сведения о работе и безопасности этого устройства. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для дальнейшего использования.
- Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
- Минимальное время измерения до появления звукового сигнала обязательно должно соблюдаться!
- Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены.
- Не используйте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями. Во время использования устройства минимальное расстояние от источников таких полей должно составлять 3,3 м (м).
- Оберегайте прибор от ударов и падений!
- Избегайте сгибания наконечника термометра более чем на 45°!
- При хранении и использовании прибора температура окружающей среды не должна превышать 60 °C. НИКОГДА не подвергайте прибор кипячению!
- Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «.
- Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года либо после механического удара (например, падения). Для проверки прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу Microlife.

**ВНИМАНИЕ:** Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только на результат измерения.

Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Изделие типа BF

##### Включение термометра

Для включения термометра нажмите кнопку Вкл/Выкл ①; короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра. Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов, подтверждающих исправность прибора.

Данные последнего измерения отображаются на дисплее ② автоматически в течение 2 секунд со знаком «M». Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на дисплее ② появляются символ «L» и мигающий символ «°C». Термометр готов к работе.

##### Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность измерения) на дисплей выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.

##### Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ «°C» мигает. Окончание измерения подтверждается 10-кратным звуковым сигналом, символ «°C» прекращает мигать. Температуа тела определена. Результат измерения отображается на дисплее. Если температура превышает 37,5 °C, раздается 35 коротких звуковых сигналов, извещающих пациента о том, что у него повышена температура. Ссылка: температура на ру.

Проведите повторное измерение с интервалом в 1 минуту, чтобы получить сопоставимые результаты.

Для продления срока службы батареи выключайте термометр кратким нажатием кнопки Вкл/Выкл ①. Автоматически термометр выключается примерно через 10 минут.

##### Просмотр последнего измерения

Нажмите кнопку Вкл/Выкл ① в течение 2 секунд во время включения термометра. Последнее измерение будет отображаться вместе с «M» символом памяти. Нажмите кнопку Вкл/Выкл снова, чтобы выключить устройство.

##### Способы измерения / Нормальная температура тела

##### ► Во рту (орально) / 35.5 - 37.5 °C

Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от корня языка. Измерительный датчик ④ должен находиться в хорошем контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.

##### Приблизительное время измерения: 10 секунд!

##### ► В заднем проходе (ректально) / 36.6 - 38.0 °C

Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный датчик ④ термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.

##### Приблизительное время измерения: 10 секунд!

##### ► В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34.7 - 37.3 °C

Для получения более надежных результатов мы рекомендуем измерять температуру орально или ректально. Рекомендуется соблюдать минимальное время измерения 5-10 минут независимо от звукового сигнала.

##### Очистка и дезинфекция

Название: изопропиловый спирт 70 %; макс. время погружения: 24 часа.

##### Замена батарее

Если на дисплее появился символ «▽» («перевернутый» треугольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного отсека ③ с термометра. Вставьте новую батарею положительным полюсом вверх. Убедитесь, что вы взяли батарею такого же типа. Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.

| Технические характеристики      |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип:</b>                     | Предвительный максимальный термометр                                                                                                                                                           |
| <b>Диапазон измерений:</b>      | от 32,0 <span> </span> °C до 43,9 <span> </span> °C<br>Темп. < 32,0 <span> </span> °C: отображается «L» (слишком низкая)<br>Темп. > 43,9 <span> </span> °C: отображается «H» (слишком высокая) |
| <b>Точность измерений:</b>      | ± 0,1 <span> </span> °C в диапазоне от 34 <span> </span> °C до 42 <span> </span> °C                                                                                                            |
| <b>Условия применения:</b>      | 10 - 40 <span> </span> °C; максимальная относительная влажность 15-95 <span> </span> %                                                                                                         |
| <b>Условия хранения:</b>        | -25 - +60 <span> </span> °C; максимальная относительная влажность 15-95 <span> </span> %                                                                                                       |
| <b>Батарея:</b>                 | 1,5/1,55 V; LR41                                                                                                                                                                               |
| <b>Срок службы батарее:</b>     | примерно 4500 измерений (при использовании новой батареи)                                                                                                                                      |
| <b>Класс защиты:</b>            | IP67                                                                                                                                                                                           |
| <b>Соответствие стандартам:</b> | EN 12470-3, медицинские термометры ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11                                                                                                |
| <b>Ожидаемый срок службы:</b>   | 5 лет или 10000 измерений                                                                                                                                                                      |

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/EEC.

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

##### Гарантия

Мы предоставляем Вам пожизненную гарантию с даты покупки. Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильным обращением с прибором. Гарантия также не распространяется на батарею и упаковку. Любые требования по возмещению ущерба в этих случаях исключены. Гарантийные претензии должны подаваться с документом, подтверждающим покупку. Пожалуйста, тщательно упакуйте неисправный прибор и отправьте его по почте дистрибьютору Microlife, проследив за достаточностью оплаты почтовых расходов.

| Описание на термометъ-ра                                 | BG |
|----------------------------------------------------------|----|
| ① Бутон Вкл/Изкл. (ON/OFF)                               |    |
| ② Дисплей                                                |    |
| ③ Капак на отделенияето за батериите (на задната страна) |    |
| ④ Измервателен сензор                                    |    |

##### Важни инструкции за безопасност

- Следвайте инструкциите за употреба. Този документ предоставя важна информация за работата и безопасността по отношение на това устройство. Моля, прочетете внимателно този документ, преди да използвате устройството и го запазете за бъдещи справки.
- Инструментът трябва да се използва само за измерване на телесната температура!
- Минималното време за измерване, до чуването на звуковия сигнал, трябва да се спазва без изключения!
- Не позволявайте на деца да използват прибора без родителски контрол; някои части са достатъчно малки, за да бъдат поглънати.
- Не използвайте устройството в близост до силни електромагнитни полета, като мобилни телефони или радиоинсталации. Дръжте на минимално разстояние от 3.3 м от тези устройства, когато използвате това устройство.
- Пазете инструмента от удар и изпускане!
- Избягвайте огъване на върха на повече от 45°!
- Избягвайте температурата на околната среда над 60 °C. НИКОГА не поставяйте инструмента в кипяща вода!
- За да почистите инструмента, използвайте само дезинфектанти от търговската мрежа, които са посочени в раздела «Почистяване и дезинфекциране».
- Препоръчително е инструментът да се тества за точност на всеки две години или след механичен удар (например след изпускане). Моля свържете се с Microlife-сервис, за да организирате теста.

**ВНИМАНИЕ:** Резултатът от измерването, даден от това устройство не е диагноза! Да не се разчита само на резултата от измерването.

Батериите и електронните уреди трябва да се изхвърлят съгласно местните приложими разпоредби, а не с битовите отпадъци.

Прочетете внимателно инструкциите, преди да ползвате този уред.

Класификация на използваните детайли - тип BF

##### Включване на термометъ-ра

За да включите термометъ-ра, натиснете бутона Вкл/Изкл. ①; чува се кратък звуков сигнал, когато термометърът е включен. Извършва се проверка на дисплея. Всички сегменти се излизат на екрана. Последната измерена стойност ще бъде изведена на дисплея ② автоматично за 2 секунди с иконата «M». След това, при температура на околната среда по-ниска от 32 °C, «L» и мигане «°C» се появяват на дисплея ②. Термометърът е готов за използване.

##### Проверка за изправност

Правилното функциониране на термометъ-ра се проверява автоматично при всяко включване на термометъ-ра. Ако се установи повреда (неточност при измерване), това се обозначава чрез «ERR» на дисплея и измерването става невъзможно. В този случай термометърът трябва да бъде подменен.

##### Използване на термометъ-ра

Изберете предпочитания от Вас метод за измерване. Когато измервате температурата, текущата температура непрекъснато е изведена на дисплея и символа «°C» мига. Когато се чуе 10-кратен звуков сигнал и символът «°C» престане да мига, това означава, че данните са готови за отчитане. 35 къси звукови сигнала и оцветен в черено дисплей предупреждават, че пациентът може да има температура равна на или по-висока от 37.5 °C. Справа: орална температура.

За постигане на сравними резултати оставете интервал от 1 минута между измервания.

За да удължите живота на батерията, изключете термометъ-ра чрез кратко натискане на бутона Вкл/Изкл. ①. В противен случай, термометърът автоматично ще се изключи след 10 минути.

##### Преглед на последното измерване

Натиснете на бутона Вкл/Изкл. ① за 2 секунди, при включване на термометъ-ра. Ще се покаже последното измерване заедно със символа за памет «M». Натиснете на бутона Вкл/Изкл. отново, за да изключите устройството.



